


ОДНОРАЗОВЫЙ ЦИРКУЛЯРНЫЙ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО МЕТОДУ ЛОНГО

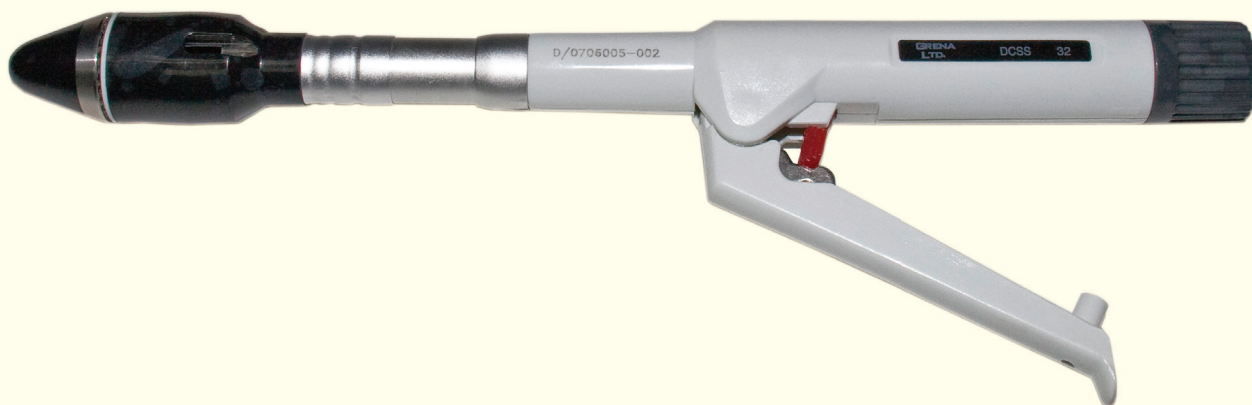

Аппарат включает в себя стационарный картридж с циркулярным ножом и двумя рядами титановых скобок, подвижный шток, расположенный по оси картриджа, и съемную наковальню крепящуюся в рабочем режиме аппарата на конце штока. В комплект с аппаратом входят: прозрачный циркулярный анальный диллятатор, обеспечивающий атравматичную девульсию (прозрачность устройства

позволяет четко контролировать зубчатую линию) и аноскоп для наложения кистетного шва.

Одноразовый циркулярный сшивающе-режущий аппарат GRENA Ltd является простым в обращении и надежным инструментом при выполнении слизисто-подслизистой резекции прямой кишки по способу Лонго при хроническом геморрое.

Программа поставок одноразовых циркулярных сшивающих аппаратов для выполнения операций Лонго (набор)

Каталог №	Тип	Размер мм	Кол-во в упаковке	Кол-во скобок	Высота открытой скобки	Диаметр шва	Ширина коронки скобки	Толщина шва
DCSS-32U	Прямой (набор)	32	стерильно – 1 набор	30	3,8	22,2	4,0	1,0-1,5
DCSS-34U	Прямой (набор)	34	стерильно – 1 набор	32	3,8	24,2	4,0	1,0-1,5
DCSS-36U	Прямой (набор)	36	стерильно – 1 набор	34	3,8	26,2	4,0	1,0-1,5

Программа поставок одноразовых циркулярных сшивающих аппаратов для выполнения операций Лонго (набор) с несъемной головкой

Каталог №	Тип	Размер мм	Кол-во в упаковке	Кол-во скобок	Высота открытой скобки	Диаметр шва	Ширина коронки скобки	Толщина шва
DCSS-32F	Прямой (набор)	32	стерильно – 1 набор	30	3,8	22,2	4,0	1,0-1,5
DCSS-33F	Прямой (набор)	34	стерильно – 1 набор	32	3,8	24,2	4,0	1,0-1,5