


## ● КЛИПАПЛИКАТОРЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ

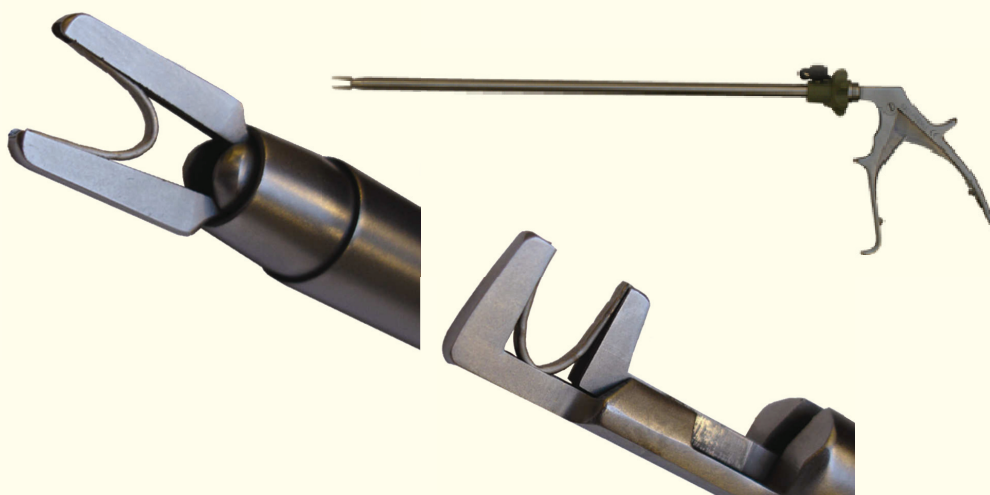

**Инструмент** предназначен для наложения титановых клипс стандарта Эतिकон на сосуды, протоки и другие тканевые структуры в ходе эндохирургических (лапароскопических/торакоскопических) вмешательств.

Изготовлен из прочной высоколегированной медицинской стали. Изделие неразборное, герметичное. Бранши клипапplikатора могут поворачиваться на 360 градусов, механизм управления подвижной частью клипатора выполнен из автоклавируемого пластика бледно-зеленоватого цвета. Имеется промывной канал, диаметром 10 мм, закрытый крышкой из автоклавируемой черной резины. Бранши имеют внутренние пазы глубиной 15 мм,

обеспечивающих лучший захват и удержание клипсы. Эргономичная рукоятка с возвратной пружиной облегчает работу. Изделия промаркированы с указанием номера, наименования производителя, соответствие сертификату Европейского Сообщества. Длина рабочей части клипапplikатора составляет 35,5 см, длина браншей 15 см.

Инструмент выпускается в двух вариантах: прямой и боковой. Бранши прямого клипапplikатора наклонены на 5 градусов, бранши бокового на 90 градусов относительно оси клипапplikатора. В зависимости от размера используемых клипс прямой клипапplikатор имеет три размера, боковой два размера.

### Программа поставок клипапplikаторов эндоскопических стандартных

Каталог №	Размер	Расстояние зажима браншей, мм	Рекомендуемые размеры лигируемых структур, мм	Кол-во шт. в коробке
<b>Прямой эндоскопический клипапplikатор</b>				
0301-02ME	Средний (M)	0,84–0,90	1,0–2,5	1
0301-02MLE	Средне-большой (ML)	1,20–1,30	2,5–4,0	1
0301-02LE	Большой (L)	1,30–1,50	3,5–7,5	1
<b>Боковой эндоскопический клипапplikатор</b>				
0301-02MLES	Средне-большой (ML)	1,20–1,30	2,5–4,0	1